



PRO SKIN KIT

VB-PSK

by **vacSy**[®]



Поздравления за покупката на ProSkin Kit!

Впуснете се в пътуване на грижа за себе си и се отдайте в иновативно изживяване в грижата за кожата с ProSkin Kit, колекция от аксесоари за красота прецизно проектиран да погледи и съживи вашата кожа.

Нежното засмукване, създадено от вакуумна терапия стимулира клетъчната регенерация, подобрява кръвообращението и насърчава колагена производство, докато докосването на истински диамант пудрата изсветлява и подмладява.

С ProSkin Kit постигате резултати които съперничат на тези от най-престижните салони за красота, точно в комфорта от собствения си дом.

PRO
SKIN
KIT by vacSy®

Съдържание

1. Въведение
2. Инструкции за безопасност
и Предупреждения
3. Комплект ProSkin
 - 3.1. Ексфолираща глава
 - 3.2. Черни точки Глава
 - 3.3. Лифтинг на главата
 - 3.4. Чаша с глава
4. Употреба
5. Поддръжка
6. Декларация за съответствие

Механизмът зад ProSkin

ProSkin използва механизъм за нежно засмукване който произвежда пет здравословни ефекта, осигурявайки спа преживяване в комфорта от вашия дом.

Всеки от аксесоарите от комплекта SkinPro е щателно изработена, за да се погрижи за специфична красота и уелнес нужди, осигурявайки цялостна и персонализирано изживяване.



За всеки тип
кожа



Подновява
кожните клетки



По-гладка
и кадифена
кожа

PRO
SKIN
KIT *by* vacSy®

Относно това ръководство с инструкции

Моля, прочетете внимателно инструкциите за безопасност и използвайте продукта само както е описано в тези инструкции, за да избегнете случайно нараняване или повреда.



Този символ ви предупреждава на риска от нараняване.



Този символ ви предупреждава за риск от нараняване от електричество.

Пакетът съдържа:

- ексфолираща глава
- глава с черни точки
- фейслифт глава
- 2 вендузи
- 25 сменяеми филтъра
- 1 чанта за аксесоари

1. Въведение

Добре дошли в ProSkin Kit - Където красотата среща технологиите.

Първото по рода си устройство за микродермабразио с диамантен прах почиства порите, премахва черните точки, бори се с признаците на стареене, стимулира производството на колаген и еластин, подпомага обновяването на клетките и подобрява блясъка на кожата. Само 10 минути седмичен масаж на лицето ще трансформират кожата ви само за 4 седмици, оставяйки я по-здрава и сияйна.



Важно е да споменем, че тези аксесоари ProSkin Kit могат да се използват само в комбинация с Vacsy Vacuum Pump Deluxe, VB-P от Zepter.

Помпата е оборудвана със сензор, който автоматично ще разпознава аксесоарите и активирайте различните лечебни функции.

2. Инструкции за безопасност и Предупреждения

 Прочетете ръководството преди употреба и го запазете за в бъдеща справка.

 Устройството не е играчка, пазете го далеч от деца.

 Не използвайте, ако кожата е подута, раздразнена или възпалена.

 Уверете се, че полимерният филтър е позициониран правилно, филтърът, ръцете и кожата трябва да са сухи. Кожата може да се зачервени след употреба. Ако зачервяването продължава, консултирайте се с лекар за по-нататъшна употреба.

 Не използвайте пилинг, абразивни или други дразнещи продукти преди и след използване на ProSkin Kit.

 Не е подходящ за бременни жени; деца; хората страдащи от епилепсия, тумори или възпаления; хора с пейсмейкър; хора, чувствителни към топлина и вибрации; лица, страдащи от екзема или дерматологични заболявания.

 Ограничете употребата до максимум два пъти седмично.

По време на употреба:

 Избягвайте рязкото повдигане от кожата.

 Не спирайте в една и съща зона за повече от 2 секунди.

3. ProSkin Kit

3.1. Ексфолираща глава (Повърхност с диамантен прах): Разкрийте своето излъчване



Сила на вакуум:



Премахване на токсини:



Подобрение на микроциркулация:



Отличава се с микрокристална повърхност, направена от истински диамантен прах, предлагайки многобройни предимства, като нежно премахва матовите, мъртви кожни клетки, поставяйки перфектната основа за вашата рутинна грижа за кожата.

Препоръчителна употреба


Подходящ за всеки тип кожа и може да се използва върху цялото лице. Препоръчителната продължителност за всяка употреба е 8-10 минути за оптимални резултати.



Движете устройството напред-назад по кожата.



Използвайте бавни и плавни движения.

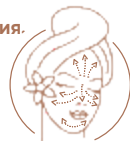

PRO
SKIN
KIT by vacSy®

3.2. Глава за Черни точки:



Сила на вакуум:



Премахване на токсини:



Подобрение на микроциркулация:



Предназначен за премахване на черни точки, намаляване на себума производство и дълбоко почистване на порите. прегръдка увереността, която идва с ясни, лъчезарни, и красива кожа.

Препоръчителна употреба
Идеален за мазна и смесена кожа, това глава е специално препоръчително за използване в областта на носа, поради неговата сила.



3.3. Лифтинг на лицето Глава:



Сила на вакуум:



Премахване на токсини:



Подобрение на микроциркулация:



Уникалната му форма е перфектна за масажирание на кожни тъкани и активиране на кръвната и лимфната микроциркулация. Подпомага производството на колаген и еластин, намалява бръчките и има лифтинг ефект.

Препоръчителна употреба
Подходящ за използване върху бузите, скулите, челото и челюстта.



- ! Движете устройството напред-назад по кожата.
- ! Използвайте бавни и плавни движения.



3.4. Cupping глава Увеличете своето цялостно благосъстояние



Сила на вакуум:



Премахване на токсини:



Подобрение на микроциркулация:




Въведение в Cupping

Cupping е древна ориенталска техника, използваща чаши за създават празнини, насърчавайки производството на колаген и еластин. Ефективен е за козметични процедури, намаляване на целулита, и подпомагане на спортисти след тренировка чрез:

- Насърчаване производството на еластин и колаген
- Намаляване на отоци, болки в крайниците и мускулите
- Третиране на целулит и стрии

Препоръчителна употреба

Cupping главата може да се използва върху ръце, рамене, гръб, корем, ханш, бедра и глутеуси.

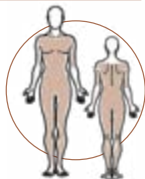

Cupping процедури

Преди да започнете лечението, не забравяйте да подхраните кожата си с масло или крем за тяло. Това ще гарантира, че вендузната глава се плъзга без усилие по кожата ви, свеждайки до минимум всеки дискомфорт или дразнене.



Традиционен режим

- ① Поставете чашата върху засегнатата област.
- ① Създайте празнина, след което премахнете вакуума.
- ① Оставете чашата върху кожата, докато празнината избледнее.
- ① Този режим е идеален за лечение на болки в мускулите и крайниците.

Режим на масаж

- ① Следвайте инструкциите от Традиционен режим
- ① Преместете главата ръчно за прибл. 10 минути.
- ① Идеален за целулит, стрии и релаксиращ масаж.



Лек за
болка



Намалява
целулит




Къпинг на
тялото




Стимулира
циркулацията

Внимание и пригодност

Избягвайте да използвате върху костеливи или много слаби индивиди и области с рани или разширени вени.

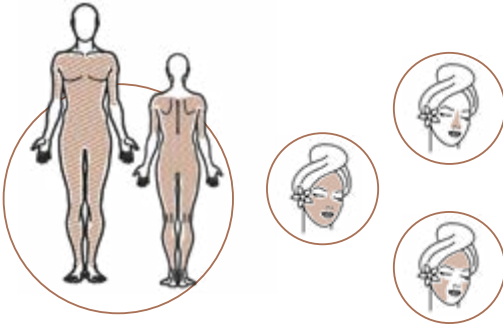

4. Употреба

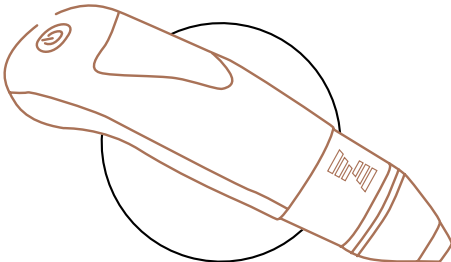

а) Препоръки за предварително третиране

За оптимални резултати и безопасност:

- ① Заредете напълно вакуумната помпа преди първата употреба.**
 - ① Използвайте ниско ниво на засмукване за първоначални обработки.**
 - ① Отворете порите с пара или топла кърпа преди всяко лечение.**
-

б) Стъпки на работа

Изберете главата, подходяща за вашето лечение.

Поставете филтъра вътре в главата.

Свържете главата към помпата Vacsy.

Щракнете веднъж върху бутона за захранване, за да зададете скоростта на засмукване на ниво 1.

Всяко следващо кликване увеличава скоростта до ниво 4.

- ① Задръжте бутона за захранване за 5 секунди, за да изключите помпата.**
-

в) Обобщени стъпки за перфектна кожа

Използвайте препарат за премахване на грим и измийте лицето си.

Отворете порите с пара.

Започнете лечение с ProSkin Kit.

Нанесете крем за лице или подхранващо масло.

Насладете се на сияещата си кожа! Повтаряйте до два пъти седмично.

d) Честота и резултати

Резултатите ще се появят след 4-6 седмици постоянна употреба.

Следвайте указанията, за да освободите естествения блясък на кожата си.

5. Поддръжка

Почистване на ProSkin

Измийте и избършете главите след всяка употреба.

Почистване на вакуумна помпа

Използвайте мокра кърпа, за да почистите вакуумната помпа.

Не накусвайте вакуумната помпа; може да причини непоправими щети.

Смяна на филтри

Сменяйте филтрите след 6-8 употреби.

6. Декларация за съответствие

Zepter Group с настоящото декларира, че всички химически вещества, използвани при производството им аксесоарите са в пълно съответствие с всички съответни правила и разпоредби, определени от Европейския съюз.

Тази декларация удостоверява нашия ангажимент да отговарят на най-високите стандарти за качество и безопасност в съответствие с приложимите директиви на ЕС.

Преоткрийте други Zepter продукти за пълноценен живот



BIOPTRON 

MedAll

SAFE AND EFFECTIVE
MEDICAL TREATMENT
FOR HEALTH,
BEAUTY & WELL-BEING





**SWISSO
LOGICAL**

SO SWISS, SO LOGICAL.



**LA
DANZA**

HYPER-REJUVENATE

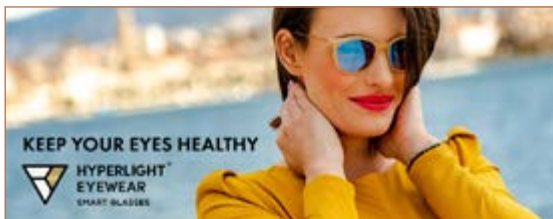

VB-PSK

PRO
SKIN
KIT
by vacSy®



Home Art & Sales Services AG
Sihleggstrasse 23
8832 Wollerau
Switzerland